



## **PAQUÍMETRO RM**

---

**Tecnobrasil Indústria e Comércio Ltda.**  
Avenida Fagundes de Oliveira, 964 - Bairro Jardim Padre Anchieta  
Diadema - SP - CEP: 09950-110



## Paquímetro RM

Paquímetro RM

## RECURSOS E BENEFÍCIOS

---

Marca:



Garantia:



# DADOS TÉCNICOS

---

## Características básicas

**Display:** Tela de Led com 5,7 polegadas

**Peso:** 1,7kg

**Dimensões:** 16x16x24,5 cm

**Bateria:** Bateria de Litium ( 10 horas de autonomia )

**Voltagem:** Bivolt

## P-Scan

**Sonda para P-Scan:** 20MHz

**Ângulo de operação:** 45 graus

**Ganho:** 0 ~ 127 dB

**Resolução:** .+/- 5 um

**Faixa de medição:** 230 ~ 1300 um

**Impressora:** Térmica embutida

**Exibição:** Modo SIMPLES ou modo MAPA

**Medição:** Ponto único ou até 9 pontos

## Principais funções do Paquímetro ( sonda P )




**Simples e Prático**

Tela sensível ao toque ( touch screen ) para uma simples e rápida introdução de dados.





## Sonda P

Sonda especial com ângulo de 45 graus permite uma operação mais fácil e confortável.

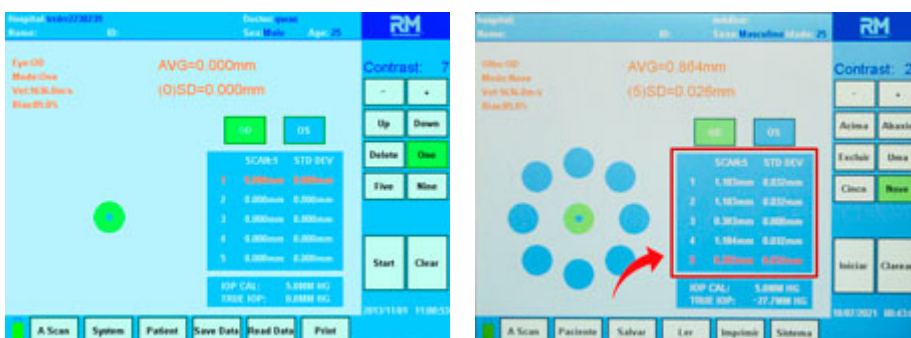


## Medições em frações de segundos!



A medição da Paquimetria e da PIO são realizadas de forma rápida , em frações de segundos ,com até 5 grupos de medidas simultâneas.

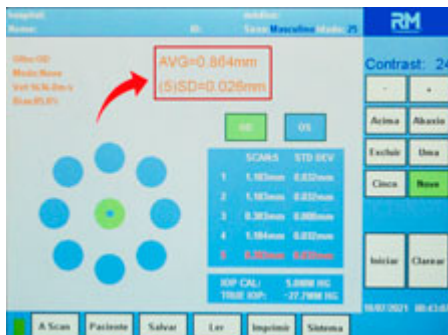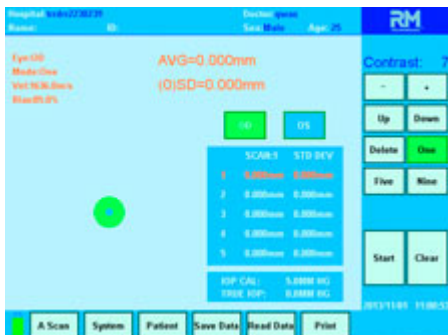

Apresenta a MÉDIA entre as medições feitas , bem como o DESVIO PADRÃO das mesmas.

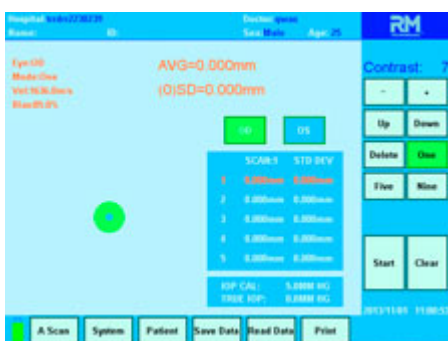


Apresenta o cálculo da PIO ( pressão intra-ocular ) e da PIO compensada com base na nas medidas de paquimetria.

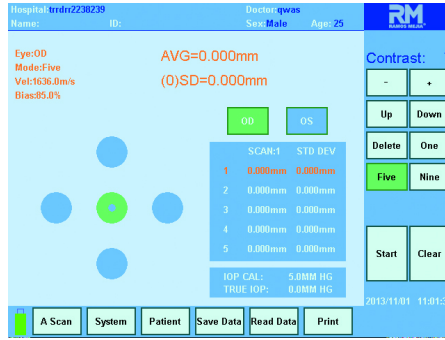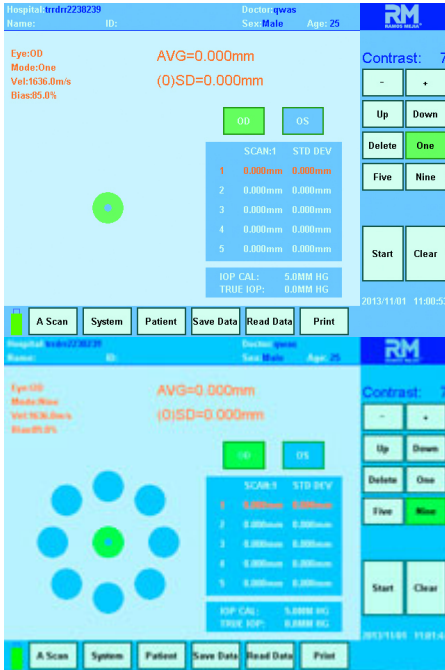

## Precisão máxima!

Opção de medição de 1 ponto , 5 pontos ou até 9 pontos para uma maior precisão e detalhamento das medições.

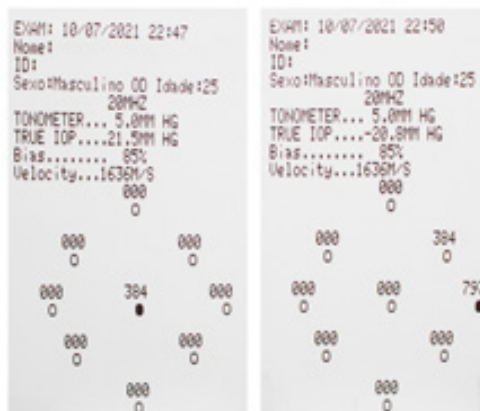

## Impressão

É possível imprimir ponto a ponto os dados da paquimetria como a PIO ( pressão

intraocular ) e a PIO compensada.



## Armazenamento

O armazenamento de dados e medições dos pacientes podem ser salvos na memória interna do aparelho , via USB ou transferidos para software de gerenciamento de dados.



### HOSPITAL DOS OLHOS

Ophthalmological Ultrasonic Medical Report

NO.: 00000003 H\_NO.: Z\_NO.: B\_NO.: ID:  
OS/OD: OS NAME: MARIA P SEX: FEM AGE: 44

OD Right					OS Left				
	AC	LENS	VTR	AL(mm)		AC	LENS	VTR	AL(mm)
#01	3.29	4.44	15.57	23.30	#01	3.29	4.44	15.57	23.30
#02	3.30	0.00	0.00	0.00	#02	3.30	0.00	0.00	0.00
#03	3.29	0.00	0.00	0.00	#03	3.29	0.00	0.00	0.00
#04	3.28	0.00	0.00	0.00	#04	0.00	0.00	0.00	0.00
#05	3.28	0.00	0.00	0.00	#05	0.00	0.00	0.00	0.00
#06	3.30	0.00	0.00	0.00	#06	0.00	0.00	0.00	0.00
#07	3.29	0.00	0.00	0.00	#07	0.00	0.00	0.00	0.00
#08	3.31	0.00	0.00	0.00	#08	0.00	0.00	0.00	0.00
#09	3.30	0.00	0.00	0.00	#09	0.00	0.00	0.00	0.00
#10	3.28	0.00	0.00	0.00	#10	0.00	0.00	0.00	0.00
S.D.	3.29	0.03	0.02	0.01	S.D.	0.02	0.03	0.02	0.01
AVG.	3.31	4.44	15.57	23.30	AVG.	3.29	4.44	15.57	23.30

OD Right				OS Left					
AL	AC	K1	K2	DR	AL	AC	K1	K2	DR
SRK-II					SRK-II				
A:		A:			A:		A:		
IOL(D)	REFR(D)	IOL(D)	REFR(D)		IOL(D)	REFR(D)	IOL(D)	REFR(D)	
16.50	1.44	17.50	1.51		16.50	1.44	17.50	1.51	
17.00	1.65	18.00	1.12		17.00	1.05	18.00	1.12	
17.50	0.66	18.50	0.73		17.50	0.66	18.50	0.73	
18.00	0.27	19.00	0.34		18.00	0.27	19.00	0.34	
18.50	-0.13	19.50	-0.46		18.50	-0.13	19.50	-0.46	
19.00	-0.54	20.00	-0.46		19.00	-0.54	20.00	-0.46	
19.50	-0.94	20.50	-0.87		19.50	-0.94	20.50	-0.87	
20.00	-1.35	21.00	-1.28		20.00	-1.35	21.00	-1.28	
20.50	-1.78	21.50	-1.69		20.50	-1.78	21.50	-1.69	

This report is for clinical doctor reference only

DOCTOR: Jefferson Gouveia  
CHK.TIME: 2021-08-27 16:00:38

## Software de gerenciamento de dados e imagens

Acompanha software para armazenamento de dados e imagens dos pacientes.

Transfira os dados em um único toque !



Linha ultra compacta e portátil , com tecnologia e precisão para seu consultório.





**Para mais informações:**

**(11) 4070-6736**

**(11) 5011-6736**

**(11) 94743-6132**

**[www.tecnobrasil.com.br](http://www.tecnobrasil.com.br)**

**[www.tecnobrasilloja.com.br](http://www.tecnobrasilloja.com.br)**

 **tecnobrasilrm**

 **tecnobrasil**

---

**Tecnobrasil Indústria e Comércio Ltda.**

Avenida Fagundes de Oliveira, 964 - Bairro Jardim Padre Anchieta

Diadema - SP - CEP: 09950-110